


災害発生時には、緊急担架として、入浴用として、ご利用下さい。

1～2人担ぎ

1人で担げます。
持ち手を持つと2人でも担げます。

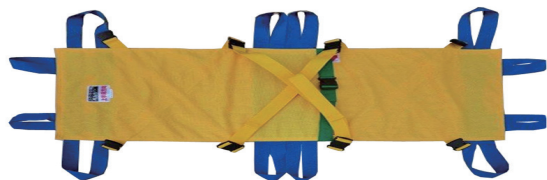

(浴槽の位置により どちら側からでも2人で担げます。)



4～6人担ぎ

4人担ぎ
持ち手を持つと6人でも担げます。



・2人で平行に担いだ時

・1人で担いだ時



使用方法


- ・スポンジマットはそのまま浴槽のふちに掛けて使用できます。(使用後は水を切り陰干してください)
- ・マット式体位保持具は入浴以外にも色々使えます。

仕様

サイズ 長さ 145cm(±2cm) 横幅54cm(±2cm)
重量 3.2kg 耐荷重 150kg
素材 ポリエステル
構造 表地 ポリエステルメッシュ
裏地 ポリエステルメッシュ
加工処理 耐久撥水 80%
フレームベルト ポリプロピレン

- ・マット式体位保持具(幅広安全ベルト付き PB-160)
- ・日本家屋の浴槽に適した構造で緊急担架としては、狭い階段でも移動できる担架です。

ベルカ に人を
乗せる位置

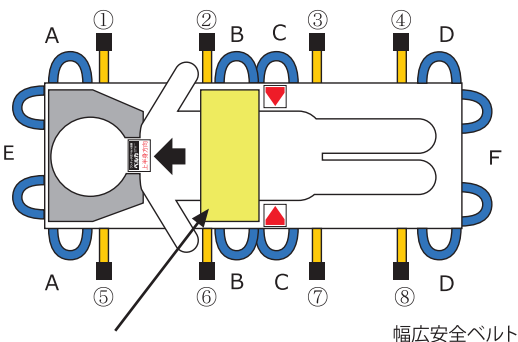


マット式体位保持具
(PB-160)

移動方向

1人で担ぐ

黄色いベルトを
②-⑦、③-⑥に
X状に接続します。


青ベルトのA-A、
D-Dを握ります。

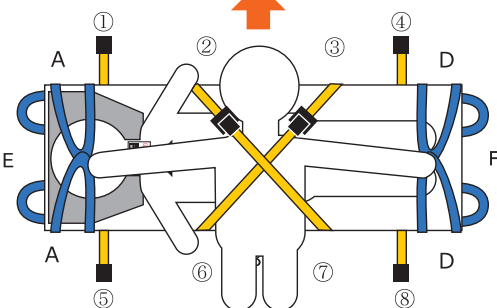

2人で担ぐ


黄色いベルトを
①-⑥、③-⑧、
②-⑤、④-⑦、に
X状に接続します。

青ベルトの(A-A、B-B)
(C-C、D-D)を握ります。

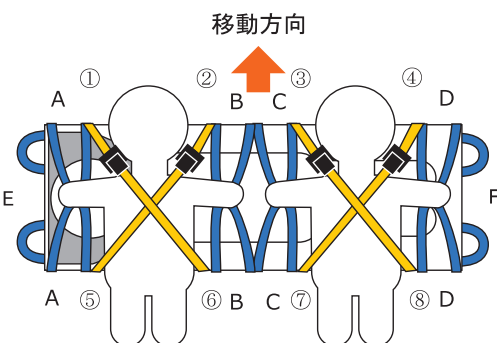

6人で担ぐ

黄色いベルトを、①-②、③-④、⑤-⑥、⑦-⑧、に
接続しカバン担ぎます。

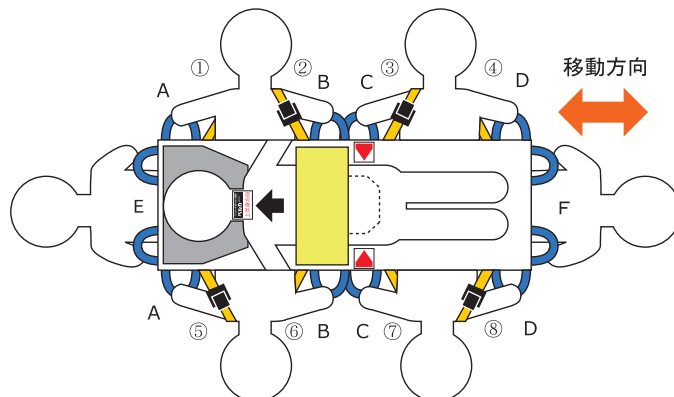

製造元

松岡株式会社

〒595-0025

大阪府泉大津市旭町 4-13