

救護用

ベルカ

商品番号

SB-160

日本縫製

担ぎ手人数 1～3人

160cmタイプは緊急時・災害発生時に交通弱者〔寝たきり、立ち居振る舞いの動作がスムーズに行かない〕方の移動の手助に最適です。



2人担ぎ

左右からベルトを肩に掛けて、両手で頭と足のベルトを握りゆっくりと持ち上げて下さい。移動は矢印方向へ、担ぎ手が上体に向けて歩いて下さい。



3人担ぎ


2人担ぎの持ち方で頭部を、もう1人でベルトを握り、ゆっくりと持ち上げて下さい。



1人担ぎ

2本のベルトを背中で交差させ、頭と足の左右のベルト2本を握りゆっくりと持ち上げて下さい。

ベルカに人を乗せる位置

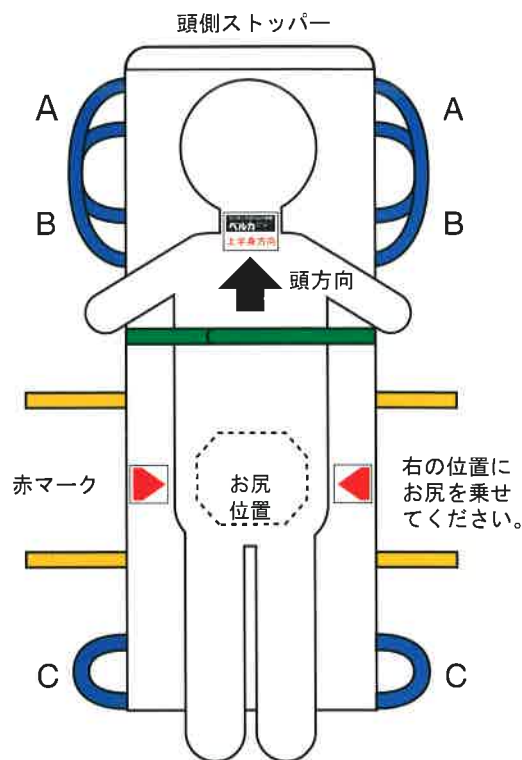

使用手順

1. 梱包してあるチャックを開きシートを広げると担架になります。搬送者のお尻を担架の赤マークの位置に寝かせ、胸部と腹部の間1カ所に緑色ベルトで固定します。
2. 肩ベルトの長さは、担ぐ人の中で身長の高い人に合わせて調整して下さい。
3. 2人又は1人で担ぐ時は、A、Bの取手を一緒に握ります。3人で担ぐ時は頭側の人が左右のA取手を持ち、他の2人がそれぞれB、Cを持ちます。

使用手順

1. 外装は本体一体型でなので使用時タンカ裏にテープで固定出来ます。
2. 防水、防炎布を使用しているため、汚れは中性洗剤で拭き取ってください。
3. 本体タンカは安全重視で4層構造の縫製をしてありますが、身体移動以外には使用を避けてください。

仕様


サイズ	長さ175cm（補助部材含む）	横幅50cm
重量	1.7 Kg	耐荷重 100Kg
材質	ポリエステル	ナイロン
構造	表地	ナイロン（撥水布）
	裏地	ポリエステル（防炎、防水布）
	フレームベルト	ポリプロピレン

製造元 松岡株式会社

〒595-0025 大阪府泉大津市旭町 4-13

SB-160 救護担架の畳み方

1. 担ぎ終えた状態で黄色ベルトの肩クッションを2の図の様に移動させます。

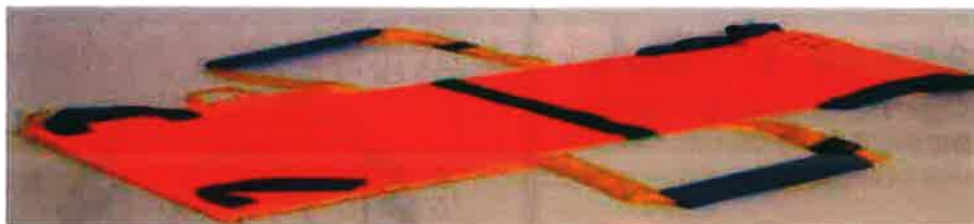

2. 頭側から折りたたみます。(ウレタンマットも一緒に)



3. 順次足元側に折りたたみます。



4. 畳み終わると外袋で覆います。



5. 元の状態で保管できます。



担架保管時のお願い

担架生地は防炎機能を持たせるために特殊接着材を使用しています
稀に保管場所の塗装剤から塗料が担架生地に移行することが御座います
(身体への影響は御座いません)

保管時次の点にご注意ください。

長期間同じ場所や直射日光、高温場所は避けて、保管ください。

付属のウレタンマットは頭、足、腰部位にご利用ください。

頭部にお使いの時は折りたたんで枕状に出来ます。